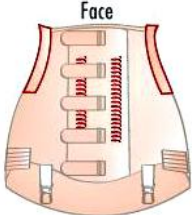




CIVB 1 : corset d'immobilisation vertébrale **sur mesure**

Le corset textile (par rapport à la solution thermoformée) offre un confort accru grâce à la souplesse des matériaux utilisés tout en garantissant l'immobilisation prescrite.

Prescription : pathologie grave du rachis lombaire, immobilisation dorso-lombaire.

<p>CIVB 1</p> <p><u>Remboursement</u> : oui</p> <p><u>Essayage</u> : oui</p> <p><u>Renouvelable</u> : chaque année</p> <p><u>Adjonctions possibles</u> : oui</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ assurer la fixité □ améliorer l'application et le maintien ◆ pathologie spécifique  <p style="text-align: center;">Face</p>		<p>Application :</p> <p>prescrit dans le cas de lésion rachidienne pathologique grave entraînant des répercussions algofonctionnelles importantes, le corset limite les mouvements antéropostérieurs du rachis et les flexions latérales.</p> <p>hauteurs d'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> - D 6 - D 9 - D 12  <p style="text-align: center;">Dos</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fermeture	<ul style="list-style-type: none"> • 1 fermeture réglable «milieu devant»: bouclage par brides (bouclage à droite ou à gauche) ; ou «antérolatérale»: laçage (droit ou gauche) <p>préciser la position sur la fiche de mesure</p>
fermeture supplémentaire	<p>agrafage ou microgrip avec «laçage»</p> <p>préciser la position sur la fiche de mesure</p>
maintien	<p>forme «cage fermée »:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 aciers ressorts « devant » (largeur 12mm/épaisseur 4-5) - 2 aciers ressorts « dos » (largeur 14mm/épaisseur 8) - 1 fourche horizontale «dos» (largeur 14mm/épaisseur 8) - 2 fourches ressort «latérales » (largeur 14mm/épaisseur 8) - 1 acier ressort «pelvien» (largeur 14mm/épaisseur 8)
choix matière et coloris	<ul style="list-style-type: none"> • Coutil Coton • 2 goussets «côtés» élastiques
renfort	<ul style="list-style-type: none"> • plastron abdominal doublé coton • doublage dos et côtés avec confort mousse • protection coton sergé sur ressorts
options	<ul style="list-style-type: none"> • plastron élastique • doublage «plastron devant» confort : mousse ou suédine • doublage «dos» : coton ou suédine (en plus de la mousse)

Adjonctions	informations à apporter sur la fiche de mesure
■ Jarretelles	préciser le système de fixation (fixe ou boutonnée) préciser le nombre de paires
■ Pattes d'entrejambe amovible (1 paire)	préciser le système de fixation : «boutonnée» ou «microgrip»
■ Sous cuisses élastiques (1 paire)	préciser la longueur
□ Coussin post-opératoire de protection	préciser les dimensions « largeur » et « longueur » en cm
□ Patte hypogastrique réglable	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride « velcro » - piton+ œillets - boucle 35mm préciser si 1 ou 2 tirants élastiques
□ Tirant hypogastrique réglable	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ bride de rappel réglable lombosacrée	préciser le système de fixation: bouclage bride « rivets pressions » - bouclage bride «velcro» - boucle 35mm
□ Sangle intérieure	préciser le système de fixation : laçage ou agrafage préciser le côté de réglage : droit ou gauche préciser la hauteur
□ Bretelle (anté flexion du tronc) si prolongement au niveau de la zone scapulaire	préciser la hauteur
□ Épaulière (anté flexion du tronc) si nécessité de correction au niveau de la ceinture scapulaire	préciser la longueur de la sangle dorsale en cm préciser le côté à maintenir : droit ou gauche
□ Béquillon réglable	préciser la hauteur du tuteur latéral en cm et le «côté» d'application
◆ Dispositif pour stomie	préciser l'emplacement lors de l'essayage (sans découper le produit ; indiquer le diamètre du cercle à réaliser)
◆ Pelote pour éventration ou hernie	préciser les dimensions « largeur » et « longueur » en cm
Forme	informations à apporter sur la fiche de mesure
□ Pelvienne ou Combiné droit (fermeture « milieu devant » : agrafage ou microgrip ; ou glissière 3/4)	préciser la forme choisie